

# Ofertas Año Nuevo 2012

## ventura similux composite microhíbrido

Microhíbrido y fotopolimerizable para anteriores y posteriores.  
Compatible con adhesivos de otras marcas.  
Gran resistencia a la abrasión con un pulido de alto brillo.  
Radioopaco. Gran mimetismo.  
Solicitenos el estudio de la Universidad Internacional de Cataluña



4 g Colores. A1 - A2 - A3 - A3,5 - B2 - C2 - Incisal

**Oferta**  
2 similux a **17,80 € c/u**  
+  
1 nanolux (4g) sin cargo

## ventura nanolux

Prueba el composite nanohíbrido con la mejor relación calidad-precio



Colores. A1 - A2 - A3 - A3,5 - B2 - C2

La jeringa le sale a **11,87 €**

Las 3 jeringas a elegir entre todos los colores disponibles

## ventura nanolux



Colores. A1 - A2 - A3 - A3,5 - B2 - C2

4 g

Te presentamos el composite nanohíbrido con la mejor relación calidad-precio

Pregunte precios a su distribuidor habitual  
Para consultas sobre el producto dirijase a [info@maadespa.com](mailto:info@maadespa.com) o visite nuestra web [www.maadespa.com](http://www.maadespa.com)



Kit 4

4 jeringas nanolux : A2- A3-A3,5-B2 (4 g c/u)  
1 ventura unibond 5 ml  
1 ventura gel grabador 3 ml  
accesorios

Kit 7



6 jeringas nanolux : A1-A2- A3-A3,5-B2-C2 (4 g c/u)  
1 jeringa de similux flow A3 (3,4 g)  
1 ventura unibond 5 ml  
1 ventura gel grabador 3 ml  
accesorios

## ventura plus

Amalgama con aleación de mezcla de partículas esféricas e irregulares



Oferta Pack


**69,80 €**

**PACK AMALGAMA**  
1 envase de 50 cap. N° 1  
+  
1 envase de 50 cap. N° 2

Ventura plus es una amalgama non gama 2 con un contenido del 50 % plata y exenta de zinc, con combinación de partículas 65% esféricas y 35% irregulares, de firme condensación.

El sistema de capsulas Ventura esta diseñado para asegurar una perfecta dosificación, tanto del polvo de aleación como del mercurio, así como una casi inexistente liberación de mercurio y una bajísima pérdida de masa.

Ventura plus se presenta en cápsulas auto-activables permitiendo un manejo y amalgamado rápido, sencillo y seguro. El mercurio esta envasado en un material de ionomero de sodio sellado por ultrasonido evitando los vapores de mercurio y aislándolo completamente de la aleación hasta que la capsula se activa durante la mezcla.

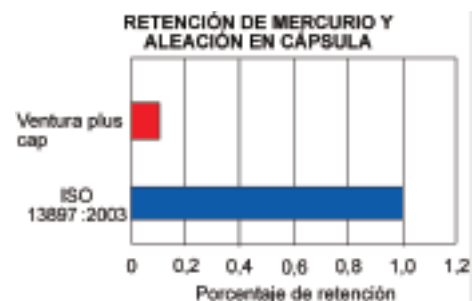

## ventura impress 2



50 ml gratis!

Siliconas de Adición

1 Ventura Impress 2 putty (soft)  
(300 ml + 300 ml)

+

1 Ventura Impress 2 light  
(3 x 50 ml + 12 puntas aplicadoras)

Todo el pack por

**52,90 €**

## ventura impress2 light

Hidrocompatible para reproducciones fieles

Hidrocompatible y con una elevada elasticidad  
Color : naranja  
Alta Tixotropía  
Fraguado rápido : 2 minutos

## ventura impress2 putty

Tipo Soft (más blanda)

Masilla hidrocompatible y de gran elasticidad  
Más cómodo, tanto para introducir como para extraer de la boca  
Color : Amarillo  
Tiempo de fraguado : 3 minutos

Pregunte a su distribuidor por toda la gama de productos de la marca...

# ventura

Distribuido por:

Río Jarama, 120 - 45007 TOLEDO - ESPAÑA  
Tel. de atención técnica del producto: 925 241 025 / e-mail: [info@maadespa.com](mailto:info@maadespa.com)  
01/2012

Oferta válida hasta el 29 de febrero de 2012.  
Ofertas no acumulables a otras promociones u ofertas.